

Hybrid Technology™ – aussi dans les intra-auriculaires Alpha

Même les plus petites aides auditives de Bernafon sont synonymes de meilleur son sans compromis. Pour que vos clients puissent bénéficier simultanément de la compréhension de la parole et du confort d'écoute.

Hybrid Noise Management™

Réduction sélective du bruit basée sur 36 000 estimations du signal par seconde

Hybrid Balancing™

Amplification sonore personnalisée selon les préférences sonores du client en fonction de la situation

Hybrid Sound Processing™

Traitement sonore précis et en temps réel avec jusqu'à 48 000 estimations du signal par seconde

Hybrid Feedback Canceller™

Élimination ultrarapide et précise du Larsen en quelques millisecondes

Les intra-auriculaires Alpha bénéficient particulièrement de la fonctionnalité hybride unique de l'Hybrid Feedback Canceller™. Elle offre une protection maximale contre le Larsen sans compromettre l'amplification ou l'intelligibilité de la parole.

Canalisation naturelle du son

Une richesse musicale au bout des doigts

Les intra-auriculaires bénéficient de l'effet naturel du pavillon de l'oreille. La forme de l'oreille agit comme un entonnoir sonore. Elle améliore les capacités de localisation des sons de l'utilisateur, notamment avec les styles IIC et CIC les plus petits, placés profondément dans le conduit auditif.

Une qualité sonore supérieure et un plaisir musical bien équilibré sont désormais possibles, même avec le petit et discret Alpha CIC avec bouton-poussoir. Vos clients peuvent aussi écouter leurs chansons préférées directement dans leurs oreilles avec l'Alpha ITC sans fil.

Le style qui convient à votre patient

De nombreux patients souhaitent qu'une aide auditive soit discrète et polyvalente. En ajoutant l'intra-auriculaire Alpha à votre portefeuille Produits, vous pouvez maintenant répondre à tous leurs besoins.

Discrétion maximale

L'Alpha IIC invisible est plus petit et plus puissant que jamais. Il se loge profondément dans le conduit auditif et profite de l'effet naturel que permet le pavillon. Muni d'un écouteur de niveau 90, même les clients souffrant d'une perte auditive sévère peuvent bénéficier du son sans compromis d'Alpha.

La gamme d'intra-auriculaires de Bernafon est tellement complète qu'elle peut répondre aux besoins de 9 clients sur 10, souhaitant porter des IIC.

Polyvalent et moderne

L'Alpha ITC est doté de nombreuses options de personnalisation. C'est le plus petit appareil sur-mesure sans fil et, grâce aux microphones directionnels, il permet de bénéficier de toute l'étendue de la gestion du bruit que la Hybrid Technology™ peut offrir. Connectez-vous à l'application EasyControl-A de Bernafon pour un contrôle simple et une meilleure prise en main.

Alpha, la gamme la plus complète de Bernafon !

BE

LB

MB

DB

BL

beige

marron clair

marron moyen

marron foncé

noir

ITC

ITE HS

ITE FS

CIC

IIC

miniRITE T

miniRITE T R

miniBTE T

miniBTE T R

midnight blue¹

marron cacao²

metallic silver

sand beige

jet black²

metallic anthracite

metallic silver²

sand beige²

antique bronze

metallic anthracite

midnight blue

metallic silver

metallic anthracite

¹ Uniquement disponible pour Alpha 9 dans les styles : miniRITE T R, miniBTE T, miniBTE T R

² Non disponible pour Alpha 3[]

Aperçu des modèles

	IIC	CIC	ITC / ITE HS / ITE FS	miniRITE T	miniRITE T R	miniBTE T	miniBTE T R
Alpha 9[7]5[3]1	●	●	●	●		●	
Niveaux d'adaptation	75, 90	75, 90	75, 90, 100				85
Écouteurs miniFit				60, 85, 100, 105		0,9 mm, 1,3 mm	nouveau
Tubes fins miniFit						●	
Coude						●	
Pile	Zinc-air 10	Zinc-air 10	Zinc-air 312	Zinc-air 312	Li-ion 312+	Zinc-air 312	Li-ion 13
Rechargeable (chargeur et Charger Plus) ³					●		●
Bluetooth® 2,4 GHz			○ ⁴	●		●	
Communication mains libres			○	●		●	
Bobine téléphonique ⁴			○ ⁴	●		●	
Technologie NFMI		○	●	●		●	
Bouton(s)-poussoir(s)		○	○	Double		Unique	
Molette de volume			○				
Microphones	Unique	Unique	Directionnel	Directionnel		Directionnel	
Revêtement hydrophobe	IP68	IP68	IP68	IP68		IP68	

○ En option● Standard
³ Les modèles de chargeurs dépendent du style
⁴ La bobine téléphonique et le Bluetooth® ne peuvent pas être tous deux inclus dans une aide auditive

Aperçu des fonctionnalités

	Alpha 9	Alpha 7	Alpha 5	Alpha 1
Hybrid Technology™				
Hybrid Sound Processing™	●	●	●	●
Bande de fréquence	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Hybrid Balancing™	●	●	–	–
Équilibreur de parole	3 options	2 options	●	●
Équilibreur de bruit	4 options	2 options	–	–
Hybrid Noise Management™	●	●	●	●
Réduction intelligente du bruit	4 options	4 options	3 options	2 options
Directivité intelligente ¹	4 options	4 options	4 options	3 options
États dynamiques	3 options	2 options	–	–
États omni	2 options	2 options	–	–
Hybrid Feedback Canceller™	●	●	●	●
Parole				
Renforcement des basses fréquences ²	●	●	●	●
Frequency Composition™	●	●	●	●
Confort				
Gestion du bruit binaurale ³	●	●	–	–
Réduction des bruits impulsionnels	4 options	3 options	3 options	–
Gestion du bruit du vent ¹	●	●	●	●
Extension de plage dynamique	●	●	–	–
Gestion des bruits faibles	●	●	●	●
Contrôle de la directivité ¹				
Dynamique	●	●	●	–
Directivité adaptative complète	●	●	●	●
Directivité fixe	●	●	●	●
Omni fixe	●	●	●	●
Omni directionnel	●	●	–	–
True Directionality Plus	●	●	–	–
Individualisation				
Personnalisation	●	●	●	●
Bandes d'adaptation	24	20	18	12
Options du programme*/mémoires ⁵	13/4	12/4	12/4	8/4
Music Experience ⁶	●	●	●	–
Coordination binaurale : Commande de volume, changement de programme ^{1,5}	●	●	●	●
Gestionnaire d'adaptation automatique	●	●	●	●
Transition	4 options	3 options	2 options	●
Data logging	●	●	●	●
Tinnitus SoundSupport ^{1,6}	●	●	●	●
Compatibilité CROS ⁷	●	●	●	●

Les notes de bas de page suivantes s'appliquent uniquement aux aides auditives personnalisées. Consultez l'aperçu du modèle pour connaître les différences spécifiques au style :

¹ Requiert des microphones directionnels (sauf « Omni fixe »)
² Requiert le Bluetooth®
³ Requiert le NFMI
⁴ Peut varier si aucune bobine téléphonique n'est présente
⁵ Requiert une fonction de contrôle (bouton-poussoir ou Bluetooth®)
⁶ Requiert un bouton-poussoir
⁷ Non disponible pour les aides auditives personnalisées

Faites votre choix parmi de nombreux styles et de fonctionnalités pour des avantages personnalisés pour les utilisateurs¹

Meilleur son sans compromis avec la **Hybrid Technology™**

Confortable à porter grâce à une **conception personnalisée** et des événements efficaces pour une sensation d'occlusion minimale

La **bonne rétention intra-auriculaire** offre un maintien sûr pendant le sport, évite de perturber le port de lunettes et protège des bruits ambiants, comme le vent

Facile à utiliser grâce au **bouton-poussoir tactile** ou au réglage du volume

Différents looks – de l'IIC invisible à l'ITC moderne en noir, en passant par l'ITE

Connectivité

Compatible avec les accessoires **Bernafon** : TV-A, SoundClip-A, et RC-A pour une assistance sonore approfondie

Communication mains libres depuis les iPhone² et iPad² avec fonction de prise d'appel via le bouton-poussoir de l'aide auditive

Diffusion sonore directe depuis les appareils iOS et Android^{TM2} avec la technologie sans fil Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz

Contrôle intuitif avec l'**application EasyControl-A** de Bernafon

¹ Les avantages peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques disponibles.
² Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Bernafon a été fondé en 1946. Depuis, ses représentants et employés, répartis dans plus de 70 pays, travaillent sans relâche dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer et commercialiser des solutions qui aident les personnes atteintes de problèmes d'audition. Grâce à notre technologie de pointe, à des produits de haute performance et à un engagement quotidien, nous nous efforçons de dépasser toutes les attentes. Nos valeurs suisses, notre compétence technologique, notre passion et nos partenariats basés sur l'authenticité nous aident à remplir notre objectif :

Ensemble, nous aidons les gens à mieux entendre et communiquer.

Pour plus d'informations sur les aides auditives, rendez-vous sur le site web de **Bernafon**.

Siège Monde
Suisse
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone : +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

SOUND
OF SWITZERLAND

f in YouTube

Bernafon dans le monde
Afrique du Sud · Allemagne · Australie · Canada · Chine · Corée · Danemark · Espagne · Finlande · France · Italie · Japon · Nouvelle-Zélande · Pays-Bas · Pologne · Royaume Uni · Suède · Suisse · Turquie · USA

www.bernafon.fr

Bernafon est une marque du Groupe Demant.
Your hearing · Our passion signifie : Votre audition · Notre passion

bernafon
Your hearing · Our passion



Alpha de Bernafon
Inspiré par le meilleur



Intra-auriculaires Alpha



Alpha de Bernafon – le meilleur du sur-mesure


Nos intra-auriculaires discrets et sur-mesure viennent compléter le portefeuille Alpha de Bernafon. Ces nouvelles aides auditives dotées de la Hybrid Technology™ associent d'excellentes performances audiologiques à une vaste flexibilité d'adaptation. Disponibles en 5 styles et 5 catégories de performance, elles ont ce qu'il faut pour répondre à bon nombre des souhaits de vos clients.

5 raisons d'équiper vos clients en intra-auriculaires Alpha :

1. Système modulaire pour une flexibilité d'adaptation maximale
2. Des appareils plus petits, bien acceptés par les utilisateurs
3. Aides auditives Hybrid Technology™ pour un meilleur son, sans compromis
4. Discrétion maximale pour les clients qui recherchent des solutions auditives invisibles
5. Solution idéale pour les clients ayant un style de vie actif

Une conception améliorée des aides auditives

Grâce à des optimisations dans le processus de modélisation et d'assemblage, les intra-auriculaires de Bernafon sont désormais plus petits que jamais. La flexibilité de positionnement supplémentaire de la bobine sans fil permet une conception plus compacte et une insertion plus profonde dans le conduit auditif.

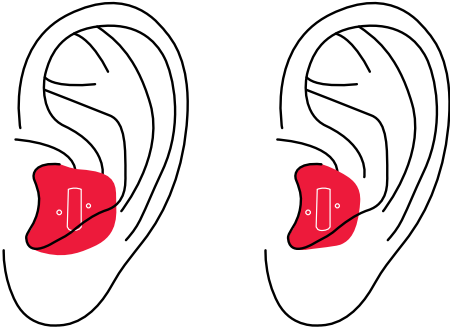

Avant

Après

A présent, 8 commandes d'intra-auriculaires sur 10 peuvent inclure des options sans fil dans un format aussi petit. Ce qui n'était pas possible avant.