


# Phonak CROS II

La solution intelligente pour la surdité unilatérale



# Présentation de Phonak CROS II

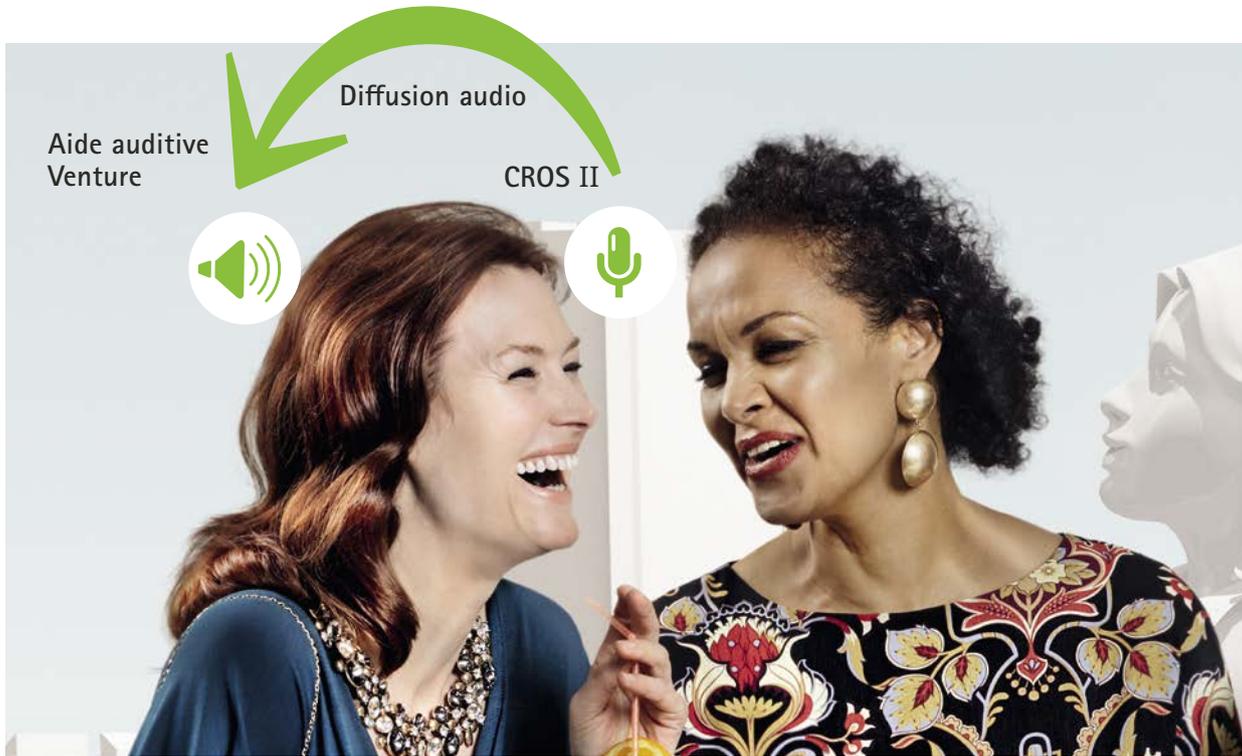

Phonak CROS II est un émetteur CROS sans fil discret, basé sur la plateforme Venture. Grâce à la technologie binaurale VoiceStream™ unique de Phonak, il transmet sans fil le son arrivant dans l'oreille non appareillable à une aide auditive Venture placée dans l'oreille avec la meilleure audition. Une personne souffrant d'une surdité unilatérale peut donc entendre la parole provenant du côté duquel auparavant elle n'entendait pas.

**Phonak CROS II est facile à appareiller, il offre une meilleure compréhension de la parole et il consomme jusqu'à 30 % d'énergie en moins que le modèle Phonak CROS précédent.**



Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13

## Facile à adapter

Nous savons que vous n'avez pas l'occasion d'appareiller un système CROS toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas ! Le processus d'appareillage simplifié du système Phonak CROS II est aussi simple et intuitif que celui d'un appareillage binaural.



Appareil d'adaptation iCube II



Rendez-vous sur [phonakpro.fr/cros](http://phonakpro.fr/cros) pour voir la simplicité d'appareillage.

## Simplicité de présentation


En utilisant iCube II, Phonak CROS II est actif pendant l'appareillage. Vos patients découvrent **instantanément les avantages** de la solution CROS et peuvent vous donner leur avis immédiatement, lors de la session d'appareillage.



Coque CROS II pour CROS II-13 uniquement

## Simplicité et sécurité

Le CROS II peut être appareillé dans plusieurs configurations pour répondre aux besoins de vos patients. Phonak a toujours la solution : la sécurité de l'association entre un coque et un embout ou le design élégant et sûr d'un SlimTip CROS sur-mesure.

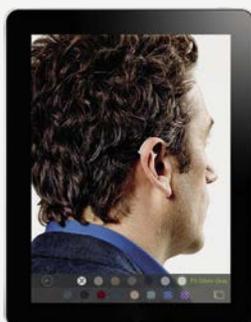

## Montrez à vos patients ce qu'ils ne peuvent pas voir

Grâce à l'application Virtual Mirror, vous pouvez utiliser un iPad pour montrer à vos patients à quoi ressemblera leur oreille appareillée avec Phonak CROS II. Vous pouvez changer virtuellement la couleur selon leurs préférences et leur montrer des images en haute définition.

**Téléchargez gratuitement l'application Virtual Mirror sur l'App Store.**



## Meilleure compréhension de la parole

Pour la première fois, **les personnes souffrant d'une surdité unilatérale vont pouvoir suivre facilement les conversations, même dans la situation auditive la plus complexe : les environnements bruyants.**

En effet, la fonction de focalisation binaurale StereoZoom permet de se concentrer sur une seule voix dans une foule et de réduire le bruit ambiant. L'émetteur CROS II diffuse donc moins de bruit à l'aide auditive de l'autre oreille, ce qui améliore la compréhension vocale dans les situations bruyantes.



Rendez-vous sur [phonakpro.fr/cros](https://phonakpro.fr/cros) pour entendre l'efficacité de CROS II dans les environnements bruyants.

## Durée de vie plus longue de la pile


CROS II transmet des signaux audio en permanence de l'oreille non appareillable à l'aide auditive placée dans l'oreille avec la meilleure audition. Grâce à la puce Venture et à son traitement sans fil plus efficace, vos patients pourront apprécier **une durée de vie de la pile 30 % plus longue que celle de l'ancien modèle Phonak CROS.**

## Contrôle du volume CROS

AutoSense OS propose une adaptation continue et complètement automatique lors du passage d'un paysage sonore à un autre. Toutefois, certains patients préfèrent garder le contrôle de leur aide auditive et pouvoir **régler séparément le volume avec l'émetteur CROS.** C'est possible avec Phonak CROS II, grâce au bouton-poussoir du modèle CROS II-312 ou au contrôle du volume du modèle CROS II-13.

# Un seul CROS II, de nombreuses options

Plus le niveau de performances de l'aide auditive est élevé, meilleures sont les performances de Phonak CROS II dans les environnements bruyants. Associez-le à une aide auditive V70 ou V90 pour profiter des meilleures performances possibles dans le bruit grâce à StereoZoom.

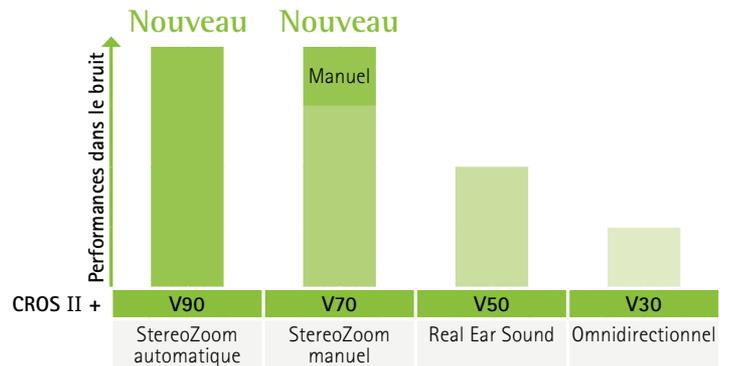

Associez CROS II à une aide auditive Phonak Venture et choisissez parmi les mêmes coloris que ceux de la gamme d'aides auditives Venture.



---

## Life is on\*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

**Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite. \*Et la vie s'exprime !**

[www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)

