

Phonak ComPilot

Données techniques

Phonak ComPilot combine la commodité de la connectivité sans fil, le confort d'une télécommande individuelle et la sécurité des messages vocales (VoiceAlerts). Le tout dans un appareil simple et élégant. ComPilot connecte les aides auditives sans fil de Phonak aux téléphones mobiles, téléviseurs, lecteurs MP3, récepteurs FM, parmi bien d'autres applications.



Description

Touches

- ① Fonctions (M)
- ② Volume +/- (+/-)
- ③ Accueil (↑)
- ④ Connexion (↔)
- ⑤ Marche/Arrêt (I/O)

Entrées



- ⑥ Ouvertures du microphone
- ⑦ Prise audio (jack de 3,5 mm)
- ⑧ Prise FM (Europlug)
- ⑨ Prise chargeur (mini-USB)

Témoins

- ⑩ Témoin audio
- ⑪ Témoin d'alimentation

Autres

- ⑫ Prises de collier
- ⑬ Collier (avec antenne)
- ⑭ Fiches de collier

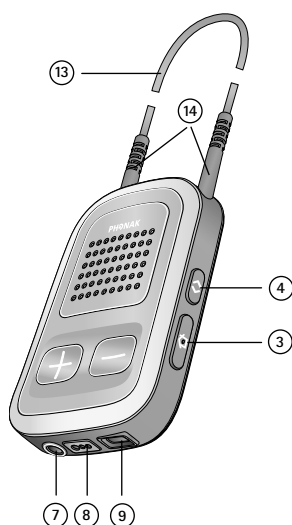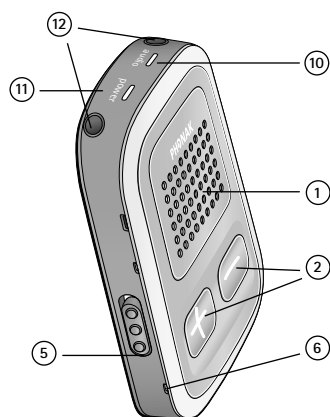

Accessoires

- Câble audio, 1,5 m / 5 ft
- Chargeur universel, mini-USB
- Collier standard (73 cm; 29")
- Collier court (50 cm; 20")
- Micro cravate externe « MC1 »
- Station de base Phonak TVLink S
- Chargeur de voiture 12 V, mini-USB

(La disponibilité peut dépendre du pays)

Informations générales

Dimensions :	L x l x H : 7,2 x 4,9 x 1,4 cm (2.8" x 1.9" x 0.6")
Poids :	46 g
Couleur :	Palladium/Noir
Conditions de fonctionnement :	Entre 0° C et +45° C / humidité relative < 95% (sans condensation)
Conditions de transport et de stockage :	-20° C à +60° C / humidité relative < 90% (sans condensation)



Source l'alimentation

Accumulateur :	Lithium Polymère 3,7 V continu
Temps de recharge :	1 heure Le temps de recharge dépend de l'état initial de l'accumulateur. Les performances maximales seront atteintes après 3 cycles complets de charge et de décharge.
Capacité :	450 mAh (typique)
Autonomie :	8 heures en diffusion Bluetooth 48 heures à l'arrêt, Bluetooth en veille 10 heures en diffusion audio via le câble 9 heures en diffusion via le système FM 2 mois en mode télécommande
Chargeur :	Type : continu, stabilisé, 5 V ± 5% Courant maximal : 500 mA L'accumulateur ne peut pas être surchargé. Il peut chauffer pendant la recharge. Remarque importante : il est recommandé d'utiliser exclusivement le chargeur original Phonak.

Informations audio

Entrées audio compatibles :	<ul style="list-style-type: none">• Câble (jack de 3,5 mm)• Bluetooth audio (stéréo)• Bluetooth téléphone• FM (Europlug)
Qualité audio :	Stéréo / Fréquence d'échantillonnage de 22 kHz
Bande passante audio :	20 Hz – 10 kHz

Bluetooth

Profils Bluetooth compatibles :	<ul style="list-style-type: none">• Profil d'oreillette (HSP)• Profil mains-libres (HFP)• Profil de distribution audio avancée (A2DP)• Profil de télécommande multimédia (AVRCP)• Profil d'accès annuaire (PBAP)
Portée Bluetooth :	10 m (classe 2)
Conformité Bluetooth :	Bluetooth version 2.1
QDID :	B018562
Max. d'appareils couplés :	8
Nombre maximum de profils connectés simultanément :	<ul style="list-style-type: none">• 2 A2DP• 2 HSP/HFP (en pratique : 2 téléphones mobiles ou 1 téléphone mobile et 1 station de base TVLink S)

Informations radio

	Antenne collier	Antenne ferrite
Type :	Détachable, inductive	Intégrée, inductive
Fréquence de fonctionnement :	10.6 MHz	10.6 MHz
Bande passante occupée (99% BP) :	588 kHz	570 kHz
Modulation :	FSK	FSK
Canal :	Canal radio unique	Canal radio unique
Intensité du champ magnétique à 10 m :	< -34 dBµA/m	< -11.5 dBµA/m
Portée vers l'aide auditive :	20 cm (8")	80 cm (33")
Mode d'utilisation :	Porté autour du cou	Tenu à la main
Cas d'utilisation :	Diffusion et télécommande	Télécommande seulement

Normes appliquées

Europe	
Radio :	ETSI EN 300 330 (HiBAN) ETSI EN 300 328 (Bluetooth)
EMC :	EN/IEC 60601-1-2
Sécurité électrique :	EN/IEC 60601-1
Etats-Unis	47 CFR Part 15.209 (HiBAN) 47 CFR Part 15.247 (Bluetooth)
Canada	RSS-210 (8ème édition) Annexe 1 (HiBAN) RSS-210 (8ème édition) Annexe 8 (Bluetooth)
Japon	EWPE (HiBAN), ARIB-T66 (Bluetooth)

Compatibilité avec les aides auditives sans fil Phonak

Diffusion et télécommande*	Nécessite les aides auditives sans fil Phonak**
----------------------------	---



Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques de fabrique déposées, propriétés de Bluetooth SIG, Inc. et chaque utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Les autres marques de fabrique et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

* Remarque : l'option télécommande doit être activée par l'audioprothésiste.

** La liste complète des aides auditives compatibles est disponible sur www.phonakpro.com dans la partie : [Support] → [Compatibilité] → Accessoires