




# VideoShow

Logiciel

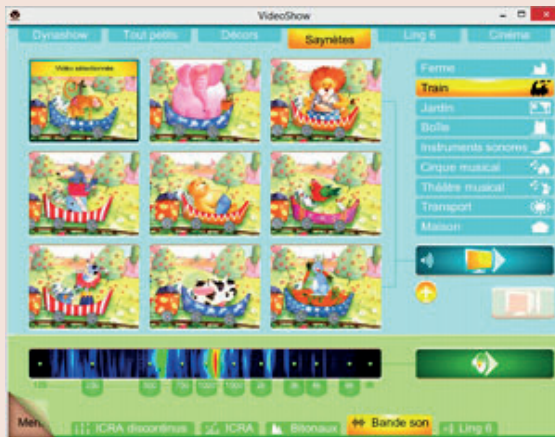

## Audiométrie de l'enfant gagnez en efficacité !

Logiciel de renforcement visuel et  
générateur de stimuli sonores réactogènes

**Audivimedia**  
Logiciels & Audition

[www.audivimedia.fr](http://www.audivimedia.fr)

# Un outil simple et convivial !


**VideoShow** est un logiciel dédié à l'audiométrie comportementale. Il contient **une large bibliothèque de récompenses visuelles** et **de stimuli sonores** spécialement adaptés à l'audiométrie pédiatrique afin de répondre aux centres d'intérêts de l'enfant de 0 à 12 ans.



L'écran de contrôle (testeur) est divisé en 2 parties : la partie supérieure contrôle le visuel, la partie inférieure contrôle le son.

La sélection des animations-récompenses est choisie par le praticien en fonction de l'âge (ou niveau de développement) parmi différentes catégories elles-mêmes divisées en de nombreux thèmes.

## Accès instantané à une bibliothèque de sons réactogènes.

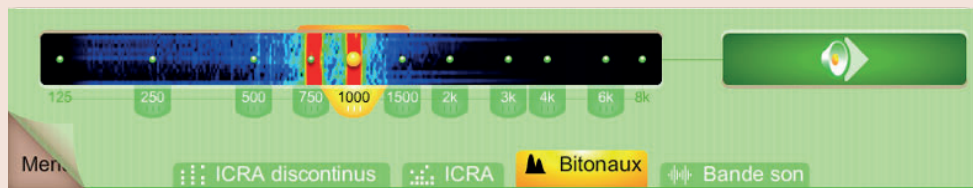

Une représentation sonographique simplifiée permet de renseigner le praticien sur le contenu fréquentiel des stimuli de la sonothèque.

Le déclenchement de l'animation sur l'écran récompense (côté enfant) est contrôlé par le clavier ou mieux, par une pédale USB. La commande au pied laisse ainsi le testeur libre de ses mouvements, qui peut ainsi interagir plus librement avec l'enfant.

En créant un espace ludique autour du test audiométrique, le **VideoShow devient un réel médiateur** entre l'enfant et le praticien. Il favorise ainsi sa pleine participation en favorisant sa disponibilité et sa concentration.

# Systeme double écran




## Adaptez la stratégie à l'âge de l'enfant !

6 catégories, 42 thèmes : 250 animations pour des enfants toujours attentifs !

La classification par catégorie des animations et leur succession selon différents thèmes offrent un matériel toujours adapté à l'âge développemental du patient et à ses centres d'intérêt (visages, animaux, voitures, musique, jouets...).

Conditionnement « surprise » avec jeu distracteur >

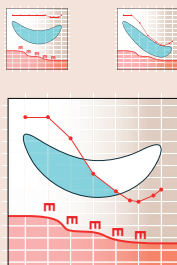

< Conditionnement actif volontaire

## **Configuration requise**

Windows :

- Processeur compatible x86 à 2.33GHz ou +
- Processeur Intel Atom à 1.6GHz ou + rapide (Netbooks)
- Microsoft Windows XP, Server 2003 ou 2008, Vista Familial Premium, Integral, Professionnel ou Entreprise (32 & 64 bits) avec Service Pack 2, Windows 7, Windows 8 Classic
- 512 Mo RAM (1 Go recommandé)

**L'achat du logiciel** comprend le logiciel (Software) et la licence d'utilisation.

**Période d'essai 10 jours.**

Pour tout matériel complémentaire (Hardware) : nous consulter.

## **Matériel complémentaire conseillé**

- Deuxième écran (résolution minimale 600 x 800) ;
- Pédale de contrôle USB configurable (modèle proposé : Delcom programmable Footswitch – USB HID 703600 – [www.delcomproducts.com](http://www.delcomproducts.com));
- Audiomètre bicanal réel pour bénéficier des stimuli sonores avec plus d'aisance

Audivimedia SARL - 48 rue Montmartre, 75002 Paris / France

Tél : +33 (0)1 44 76 84 44 – Fax : +33 (0)1 44 76 03 13

[contact@audivimedia.fr](mailto:contact@audivimedia.fr) – [www.audivimedia.fr](http://www.audivimedia.fr)

**Audivimedia**  
Logiciels & Audition

[www.audivimedia.fr](http://www.audivimedia.fr)