



## Le kit ICS Impulse Vision Denied Solution 2

**Créez une expérience plus confortable pour vos patients et améliorez l'efficacité de votre flux de travail**

Le kit Vision Denied Solution 2 pour votre ICS Impulse, qui comprend un facial et un couvre-lunettes, est conçu pour empêcher et rétablir la fixation du patient tout au long du test sans retirer l'ICS Impulse de sa tête. masque facial.

**Prêt à passer commande !**



### **Améliorer l'expérience du patient**

Le kit Vision Denied Solution 2 rend les tests plus confortables en éliminant la nécessité d'appliquer et de retirer à plusieurs reprises les lunettes ICS Impulse de la tête du patient pendant les tests les flux de travail du logiciel avec Otosuite® Vestibular.pendant.

Il suffit de fixer le facial à usage unique fourni dans chaque kit à l'intérieur de l'ICS Impulse avant de l'utiliser et d'appliquer l'ICS Impulse sur la tête du patient pour créer un ajustement confortable et sûr pendant toute la durée des processus de test.masque.

Pendant les tests, lorsque la fixation du patient sans vision est nécessaire, appliquez le couvre-lunettes Vision Denied Solution 2 à l'extérieur de l'ICS Impulse pour priver les yeux du patient de leur vision. Pour rétablir la fixation du patient, retirez le couvre-lunettes.

Une fois les processus d'essai terminés, il est facile de retirer le couvre-lunettes pendant les processus d'essai où la fixation de la vision est nécessaire. Le kit Vision Denied Solution 2 permet de réduire le nombre d'étapes du test et de créer une expérience plus agréable pour le patient, tout en améliorant la précision et en réduisant la durée globale du processus de test.



## Simplifiez votre flux de travail

- Utilisez le couvre-lunettes avec l'ICS Impulse avec le facial en place masque
- Suivez les mouvements oculaires l'état de vision et d'absence de vision pendant
- Continuez à évaluer, enregistrer et mesurer le réflexe vestibulo-oculaire et le nystagmus pendant l'état de privation de vision
- Augmentez l'efficacité de mVNG en réduisant le nombre d'étapes pour accélérer le flux de travail
- Ne nécessite pas de recalibrage

## Matériel

Le kit Vision Denied Solution 2 comprend le facial DV (Denied Vision) et un couvre-lunettes, et est conçu pour être utilisé avec les lunettes ICS Impulse.

Le kit Vision Denied Solution 2 est un produit à usage unique, disponible par lots de 50 pièces (PN : 041481) ou 200 pièces (PN : 041482).

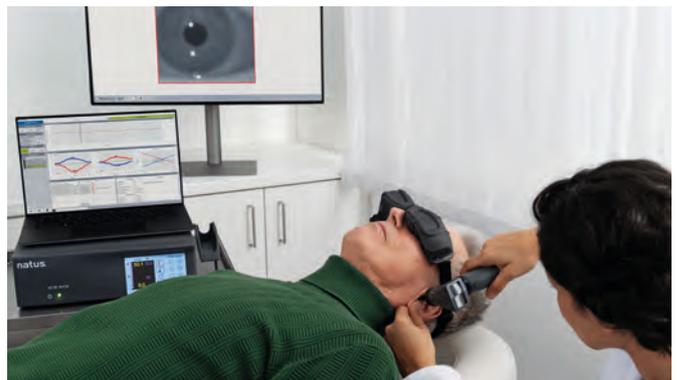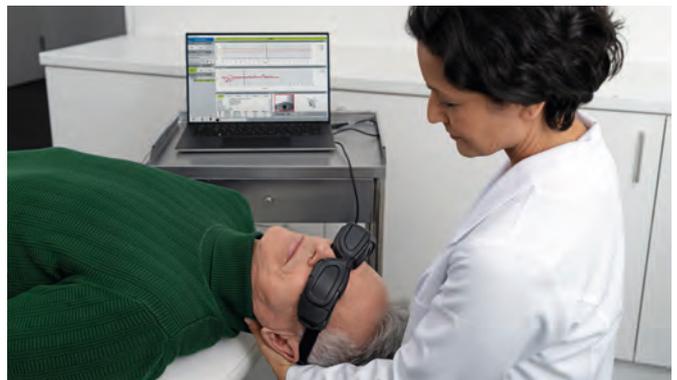

**Vous souhaitez acheter le nouveau kit ICS Impulse Vision Denied Solution 2 ? Contactez votre représentant Natus local dès aujourd'hui pour savoir comment commander !**

**Pour en savoir plus sur ICS Impulse, consultez le site [natus.com/impulse](https://natus.com/impulse)**

**Natus Medical Incorporated** est un leader de l'industrie de l'audiologie. Nous aidons les professionnels de l'audition et de l'équilibre à améliorer la qualité de vie de millions d'individus dans le monde. Natus améliore les résultats des patients en utilisant les solutions de produits les plus complètes, une formation approfondie et un service client continu lors du diagnostic et du traitement des troubles du système nerveux central et du système sensoriel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site à l'adresse **natus.com**.

## Making sense of the body's signals

©2023 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **044671-FR RevA**

**natus**®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://natus.com)