


WIDEX ENJOY™ MINI-RIC AVEC PROCESSEUR À DOUBLE COEUR



Le mini RIC WIDEX est basé sur le circuit WIDEX ENJOY avec une puce à double coeur Widex qui gère le traitement automatique de manière plus précise et plus rapide qu'auparavant.

- Une connectivité sans fil multiple via la technologie WidexLink et l'application TONELINK
- Compatible avec les appareils d'aide à l'écoute DEX
- Utilise un écouteur M
- Utilise une pile 10
- Classe de protection IP68
- Déficiences auditives minimales à sévères

PLAGE D'APPLICATION SUGGÉRÉE

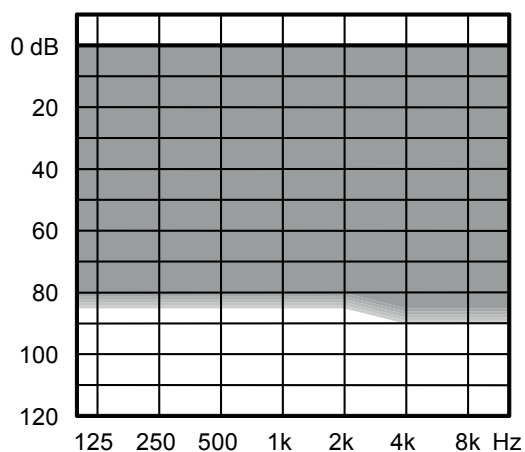

TECHNOLOGIE STANDARD

- Circuit ENJOY avec processeur à double coeur
- Méthodes d'appareillage Widex optimisées pour les adaptations ouvertes
- Principe d'accoutumance
- Technologie Power Saver IV pour une faible consommation d'énergie

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Performance	xxxxx
Canaux de traitement et de réglage fin	10

CONNECTIVITÉ

WidexLink pour les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX*	•
---	---

APPLICATIONS POUR iOS ET ANDROID

Application TONELINK	•
Application COM-DEX	•


FONCTIONNALITÉS

Gestionnaire de l'adaptation	•
Contrôle de la transition sonore (classes de sons)	4
Programmes	3
Gestion du bruit du vent	
Boost des fréquences élevées	
Mise en évidence de la parole TR	
Pavillon virtuel	
Locator	HD
Atténuateur TruSound	•
Contrôle de la préférence**	•
Réducteur de bruit de niveau faible	•
Réducteur de bruit	•
ZEN IE/ZEN+	•
Prise en charge de CROS	•
Transposition fréquentielle	•


*Inclut également les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX : TV-DEX, COM-DEX, COM-DEX Remote Mic, RC-DEX, PHONE-DEX 2

**Via l'application TONELINK ou DEX


SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE

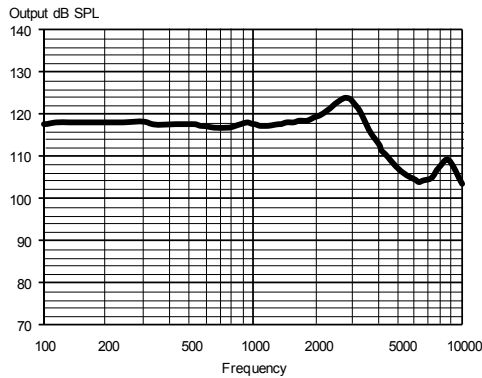


SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC

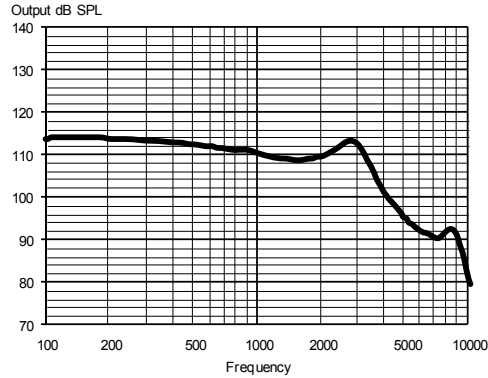

SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE

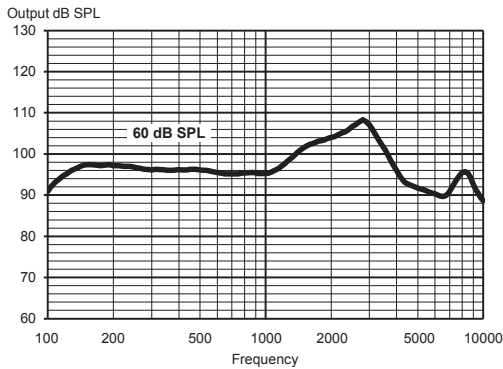

SORTIE - COUPLEUR 2CC

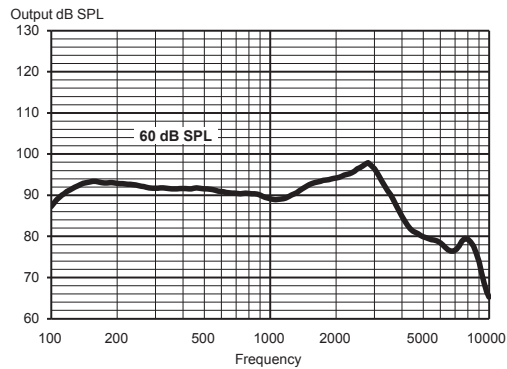

Données techniques :

Données typiques obtenues par des mesures en son pur standard. L'aide auditive est réglée sur Gain test de référence de Compass, sauf indication contraire. Mesurées au moyen d'un coupleur intra-auriculaire standard sans pare-cérumen. Pour plus d'informations, veuillez contacter Widex sur global.widex.com.

		SIMULATEUR D'OREILLE CEI 60118-0:1983 + A1:1994	COUPLEUR 2CC CEI 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Crête Moyenne	118 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	109 dB SPL 114 dB SPL 111 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	102 dB SPL 108 dB SPL 98 dB SPL	93 dB SPL 98 dB SPL 93 dB SPL
Gain total (Entrée 50 dB SPL, Gain total de Compass)	1600 Hz Crête Moyenne	63 dB 69 dB 64 dB	54 dB 59 dB 56 dB
Gamme de fréquence acoustique		100 Hz - 10 000 Hz	100 Hz - 9000 Hz
Distorsion harmonique (typique)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	< 2 % < 2 % < 2 %	< 2 % < 2 % < 2 %
Bruit équivalent à l'entrée		22 dB SPL	22 dB SPL
Consommation de la pile (veille)		0,98 mA	0,98 mA
Consommation de la pile*		1,00 mA	1,02 mA
Autonomie de la pile (Type Zinc Air 10, 100 mAh)*		100 h	100 h
Immunité face aux interférences provenant des téléphones portables (CEI 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL : -39/-7/-4 dB SPL	U-rating : M4

* La durée de vie de la pile en situations réelles dépend entre autres des fonctionnalités utilisées, du temps de streaming et de la qualité de la pile utilisée.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant. Les pièces détachées et les instructions nécessaires pour la réparation peuvent être obtenues auprès de Widex.