


WIDEX ENJOY™ XP AVEC PROCESSEUR À DOUBLE COEUR



L'intra-auriculaire WIDEX est basé sur le circuit WIDEX ENJOY avec une puce à double coeur Widex qui gère le traitement automatique de manière plus précise et plus rapide qu'auparavant.

- Une connectivité sans fil multiple via la technologie WidexLink et l'application TONELINK
- Compatible avec les appareils d'aide à l'écoute DEX
- Utilise une pile 312
- Classe de protection IP68
- Déficiences auditives minimales à sévères

PLAGE D'APPLICATION SUGGÉRÉE

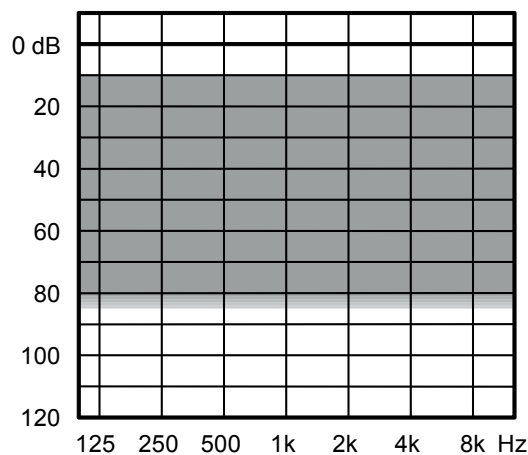

TECHNOLOGIE STANDARD

- Circuit ENJOY avec processeur à double coeur
- Principe d'accoutumance
- Technologie Power Saver IV pour une faible consommation d'énergie

FONCTIONNALITÉS CLÉS	
Performance	xxxxx
Canaux de traitement et de réglage fin	10

CONNECTIVITÉ

WidexLink pour les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX*	•
---	---

APPLICATIONS POUR iOS ET ANDROID

Application TONELINK	•
Application COM-DEX	•


FONCTIONNALITÉS

Gestionnaire de l'adaptation	•
Contrôle de la transition sonore (classes de sons)	4
Programmes	3
Boost des fréquences hautes	
Mise en évidence de la parole TR	
Locator	HD
Atténuateur TruSound	•
Contrôle de la préférence**	•
Réducteur de bruit de niveau faible	•
Réducteur de bruit	•
ZEN IE/ZEN+	•
Prise en charge de CROS	•
Transposition fréquentielle	•


*Inclut également les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX : TV-DEX, COMDEX et COM-DEX Remote Mic, RC-DEX, PHONE-DEX 2

** Contrôle de la préférence via l'application TONELINK ou DEX


SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE

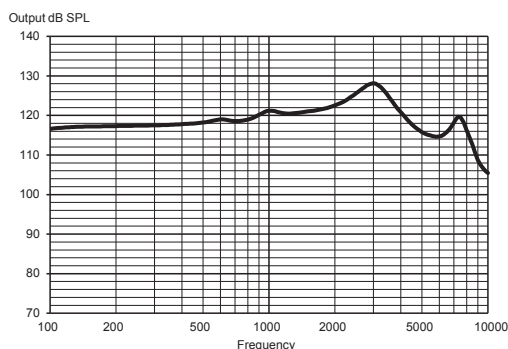


SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC

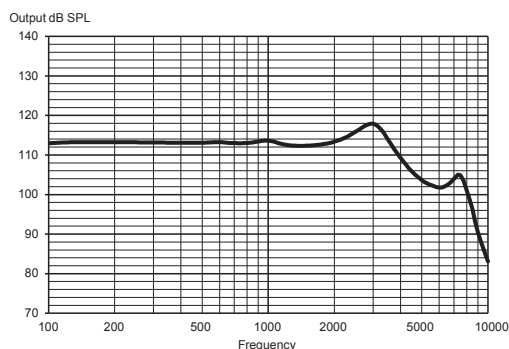

SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE

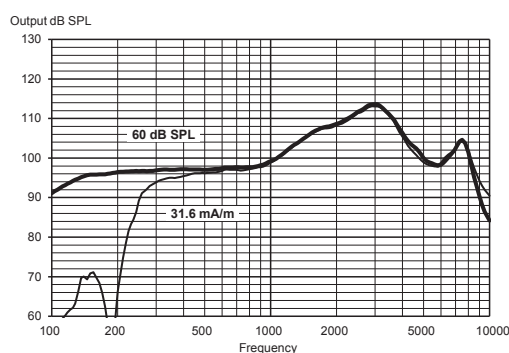

SORTIE - COUPLEUR 2CC

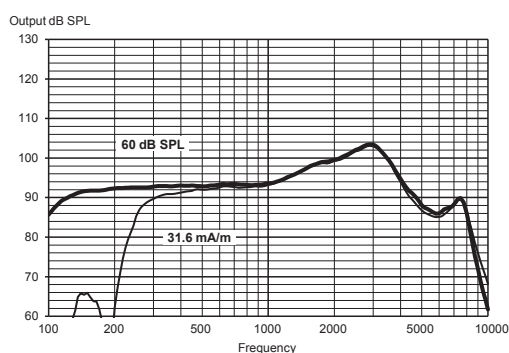

Données techniques :

Données typiques obtenues par des mesures en son pur standard. L'aide auditive est réglée sur Gain test de référence de Compass, sauf indication contraire. Mesurées au moyen d'un coupleur intra-auriculaire standard sans pare-cérumen et avec un tube de 5 x 1,55 mm. Pour plus d'informations, veuillez contacter Widex sur global.widex.com.

		SIMULATEUR D'OREILLE CEI 60118-0:1983 + A1:1994	COUPLEUR 2CC CEI 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz	121 dB SPL	112 dB SPL
	Crête	128 dB SPL	118 dB SPL
	Moyenne	121 dB SPL	114 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz	107 dB SPL	98 dB SPL
	Crête	113 dB SPL	103 dB SPL
	Moyenne	101 dB SPL	98 dB SPL
Gain total (Entrée 50 dB SPL, Gain total de Compass)	1600 Hz	66 dB	56 dB
	Crête	67 dB	59 dB
	Moyenne	65 dB	56 dB
Sortie bobine téléphonique (Entrée 31,6 mA/m)	1600 Hz	107 dB SPL	98 dB SPL
	Crête	113 dB SPL	103 dB SPL
	Moyenne	101 dB SPL	98 dB SPL
Gamme de fréquence acoustique		100 Hz - 9800 Hz	100 Hz - 8800 Hz
Distorsion harmonique	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Bruit équivalent à l'entrée		23 dB SPL	22 dB SPL
Consommation de la pile (veille)		1,05 mA	1,05 mA
Consommation de la pile*		1,15 mA	1,27 mA
Autonomie de la pile (Type Zinc Air 312, 170 mAh)*		150 h	135 h
Immunité face aux interférences provenant des téléphones portables (CEI 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL : -40/-31/-32 dB SPL	U-rating : M4/T4

*La durée de vie de la pile en situations réelles dépend entre autres des fonctionnalités utilisées, du temps de streaming et de la qualité de la pile utilisée.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant. Les pièces détachées et les instructions nécessaires pour la réparation peuvent être obtenues auprès de Widex.